

www.acist.com

ACIST アフターサービスのご案内



管理医療機器 特定保守管理医療機器(設置)
多相電動式造影剤注入装置

プロトCO2L[®]

アシスト・ジャパン株式会社

〒112-0012
東京都文京区大塚3丁目11番6号 大日本図書大塚3丁目ビル7階
TEL : 03-6902-9520 FAX : 03-6902-9248

アシスト・ジャパン株式会社
技術サービスセンター

〒143-0006
東京都大田区平和島1丁目1番2号
NTTロジスコ内 南側事務所6階
TEL : 03-5767-8991 FAX:03-3763-7273
フリーダイヤル : 0120-229-551

プロトCO2L保守点検・修理サービスのご案内



プロトCO2Lは、「特定保守管理医療機器」に該当し、年に1回の保守点検が必要です。保守点検を委託される場合は、当社にご相談ください。

プロトCO2Lの保守点検を委託される場合は、当社にご相談ください。

Q.特定保守管理医療器とは？


A.保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれのある医療機器の事をいいます。(薬機法第2条第8項)

◇プロトCO2L専用の構成された各種の治具、計測器を揃えております。

プロトCO2Lの保守点検を適正に行うためには、専門的な知識と技能が必要です。当社専門スタッフが保守点検を実施いたします。

保守点検を当社へ委託いただくには？

保守点検契約の締結をお勧め致します。お客様のご希望に合わせ、以下の3つのプランの何れかをお選びいただけます。

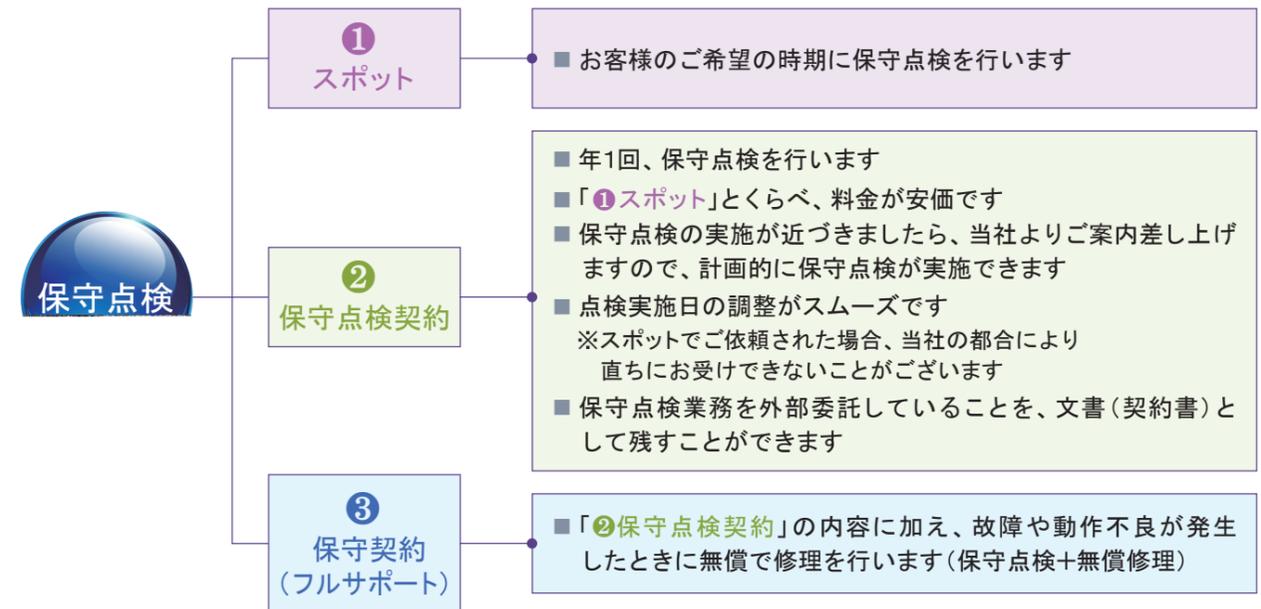


当社で行う保守点検

出張点検は行っておりません。お預かりして点検を行います。(代替機をご用意しております)

点検内容	点検項目	実施内容
■ 制御機構の点検	送気量および送気圧の校正を行います	
■ 機械的安全性の点検	機械的安全弁の作動点検を行います	
■ 電気的安全性の点検	漏れ電流の測定を行います	
■ 性能の点検	動作の総合的な点検を行います	
■ 消耗劣化の点検	装置全体の消耗劣化の点検を行います	
■ 定期交換部品の交換	ガス出力ポートのカップリングを交換します	
点検回数	■ 1回/年	

作業の流れ

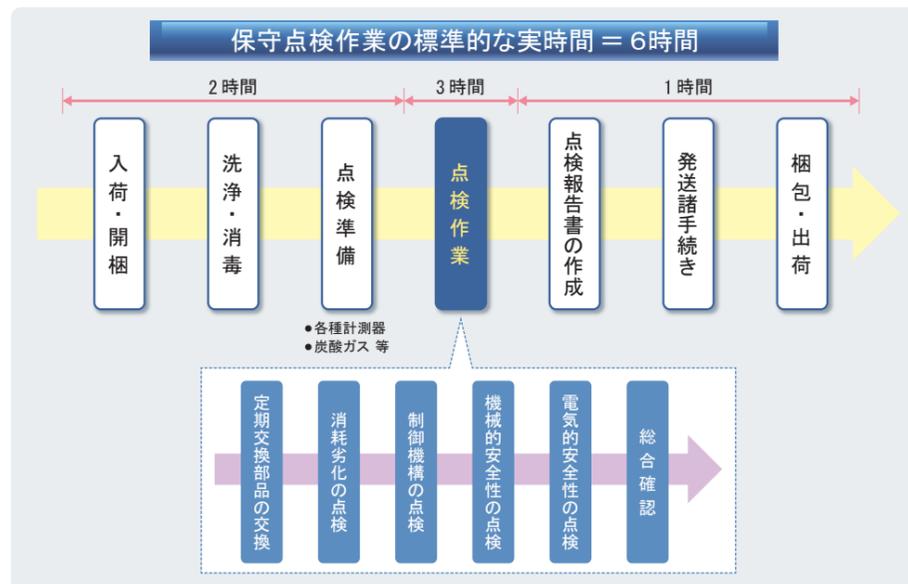

保守点検料金 (1台あたり)

内訳	料金(円)			説明	
	スポット	保守点検契約	保守契約 (フルサポート)		
保守点検	基本料金	40,000	40,000	40,000	輸送費(点検依頼機・代替機) ●往復運賃 ●輸送保険代 治具・計測器の校正管理費 ●校正作業の外部委託費※1 <small>※1:保守点検を適正に行うために、当社では治具や計測器の校正を外部業者へ委託しております。</small> 交換部品管理費
	工賃	72,000	54,000	54,000	作業工賃(6時間)
	計	112,000	94,000	94,000	
修理	無償修理代	—	—	47,000	作業工賃、部品代、輸送費
合計	112,000	94,000	141,000		(左記の金額に消費税は含まれておりません)

オンコールサービス

保守契約をご契約頂いていない場合でも、機器故障対応を下記の料金にてご提供しております。

対象機種	費目	基本技術料金	追加技術料金	部品代金
全製品	現地エンジニア派遣一式 ※現地作業時間2時間分を含む	¥50,000 平日営業時間内 1人あたり2時間以内の作業費 土日祝日: 1.5割増し 22時以降深夜作業: 1.25割増し	¥25,000/時間 土日祝日: 1.5割増し 22時以降深夜作業: 1.25割増し	実費
対象機種	費目	基本技術料金	追加技術料金	
全製品	故障診断費用 ※診断時間:3時間	¥60,000	¥25,000/時間	